



「動き」を測る。未来が動く。

MicroStone[®]

体幹2点歩行動揺計「THE WALKING[®]」

歩行評価システム

型番：MVP-WS2-EICセット

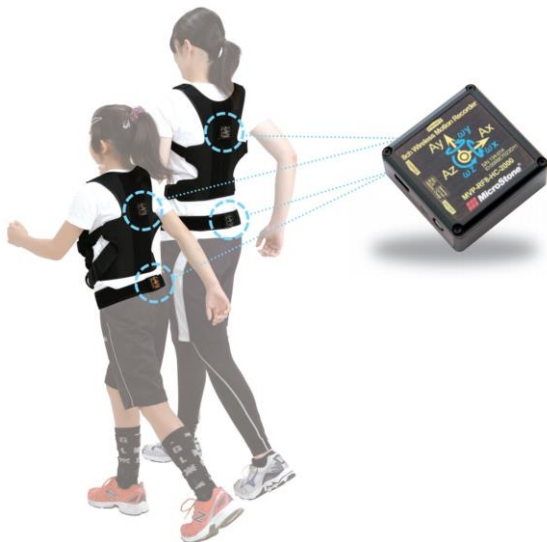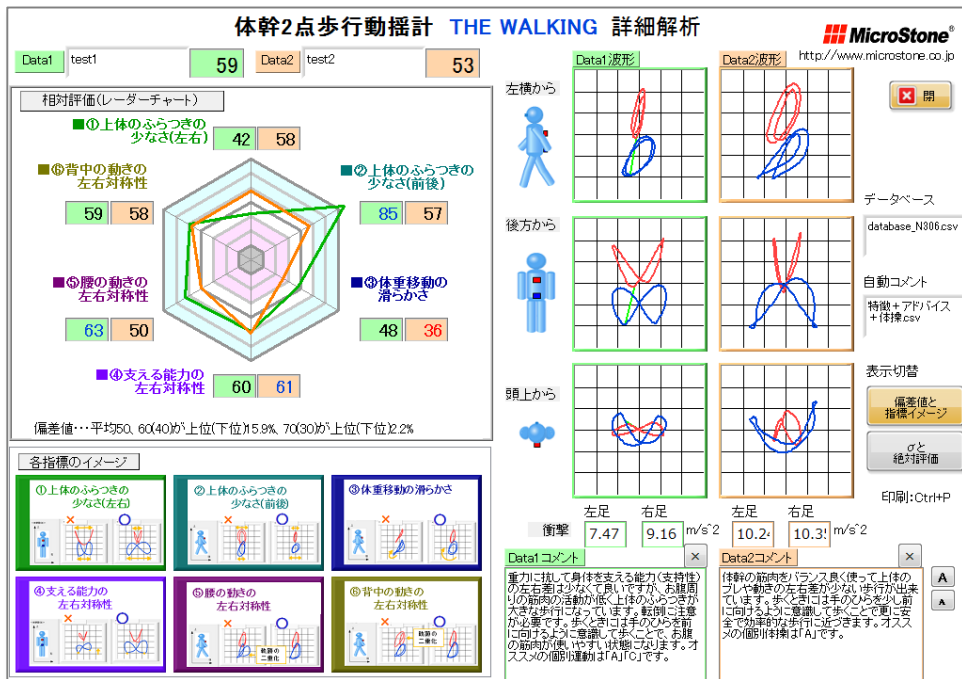

- ① 装着から解析結果表示まで約2分！
簡単に計測できる歩行計測装置です。
- ② 歩行の特徴について、軌跡波形だけでなく、6つの指標で点数化も可能。専門知識のない方にも簡単にわかりやすく、データのフィードバックが可能です。
- ③ 医療機関の人間ドック・健診項目、リハビリ部門の研究向けなどに、数多く採用されています！

詳しい情報はWebサイトにて

MVP-WS2

検索



● STEP1 計測器を装着します



● STEP2 10mほど普段通りの歩行をしてもらいます




歩行時の「胸椎付近」「仙骨付近」の動作（軌跡）を表示します。
1人1人の特徴を波形から細かく観察できます。

● STEP3 計測結果が瞬時に表示されます

歩行の特徴を6つの指標で点数化（偏差値化）します。

各指標化したデータは論文等でも使用できる、絶対値での表示・保存も可能です。

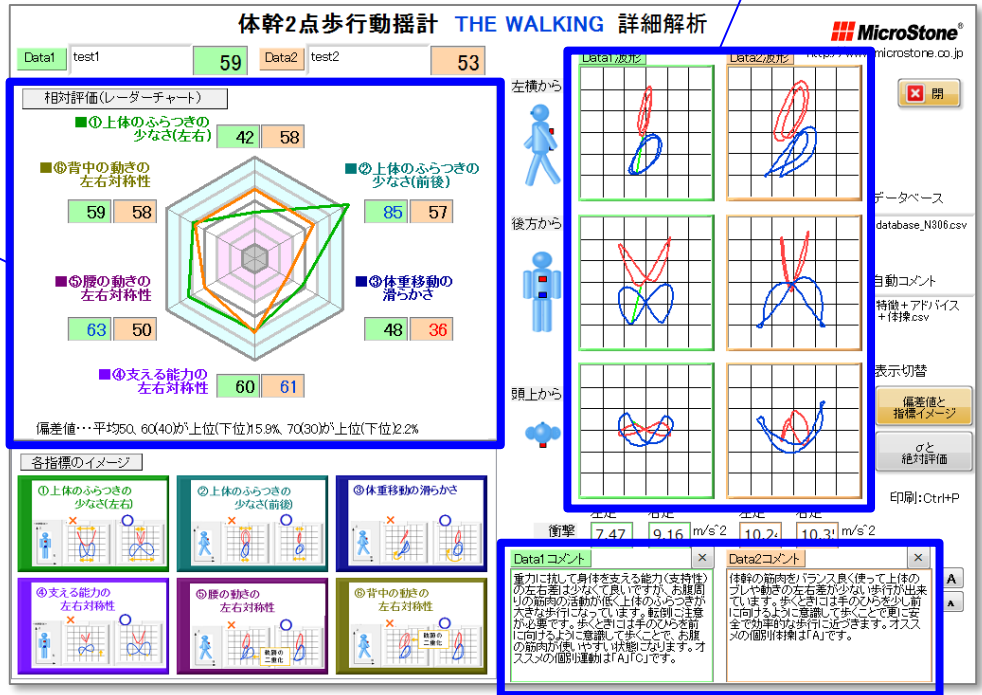

動作の特徴やお勧めの体操などを自動で表示します。

● 商品構成

種別	品名	型番	主な特徴
ソフトウェア	体幹2点歩行動揺計 コメント版ソフトウェア	MVP-WS2-S-EIC	対応OS : Windows7(64bit) 、 8、10 PC 1台につき1ライセンス。
計測器本体セット	8チャンネル小型無線 モーションレコーダ	MVP-RF8-HCセット	内容物 : 本体 MVP-RF8-HC/付属ソフトウェア MVP-RF8-S 充電用ACアダプタ/USBケーブル/スタートアップガイド/検査成績書
PC側受信器	Bluetooth-USBアダプタ	Parani-UD100	通信規格 : Bluetooth Class1 最大通信距離約30m
取付ベルト他	MVP-RF8 胸部用ベルト	MVP-RF8-CBL	本体をマジックテープで固定できる伸縮ベルト。2か所で胸部に簡単に装着可。
	MVP-RF8 仙骨用ベルト	MVP-RF8-SBL	本体をマジックテープで固定できる伸縮ベルト。幅約5cm・長さ100cm
	MVP-WS2 専用アルミケース	MVP-WS2-ALC	約46×33×14cmのアルミケース(取手部除く)。構成品を全て収納可。
オプション	コンピュータ/タブレット		ご希望に応じて、ノートパソコンやタブレットセットで納入可能。

MicroStone® マイクロストーン株式会社

〒385-0007 長野県佐久市新子田1934
TEL : 0267-66-0388 FAX : 0267-66-0355
E-mail : info@microstone.co.jp

Web : <http://www.microstone.co.jp>